

Fedezze fel a 6 opciót, melyek lefedik valamennyi klinikai esetét

Anterior: igazítsa a rétegezést páciense korához

A **Fehérített** vagy **Gyermek** helyreállítások esetében a zománc legyen fehér és opak, és a dentin is a fehér felé közeledjen. Ebben az esetben a Light Dentin és a Light Enamel kombinációja látható.

LD LE



Fiatal páciensek esetében az opak és fehér zománc, valamint a kissé kromatikusabb dentin kombinációja javasolt. Ebben az esetben a Medium Dentin és a Light Enamel kombinációja látható.

MD LE



Felnőtt fogaknál a zománc áttetszőbbé válik kis elszíneződésekkel, míg a dentin közepesen kromatikus marad. Optimális esetben a Medium Dentint fedjük Dark Enamellel.

MD DE



Idős fogak esetén a zománcnál erős transzparencia és kromatikuság igényelt, a dentin pedig sötétebb és áttetszőbb kell, hogy legyen. A tökéletes kombináció a Dark Dentin befedése Dark Enamellel.

DD DE



Poszterior: természetes kétréteges vagy szimpla egyszínes helyreállítás

Poszterior / Mono

Sok esetben már egyetlen szín, az Universal használata is elegendő a megfelelő poszterior esztétika eléréséhez.

U



Poszterior / Duo

Általában a poszterior régióban a dentin sötétebbnek tűnik, míg a zománcnak fehéres árnyalata van. A Dark Dentint fedjük le Light Enamellel.

DD LE



Essentia – az esztétikus helyreállítás két réteggel, csökkentett színekészlettel



Utántöltő – fecskendő

- 2 ml-es fecskendő visszazárható kupakkal: LD; MD; DD; LE; DE; U; OM
- 2 ml-es fecskendő 20 adagolócsőrrel: ML
- 2.4 ml-es fecskendő: RBM; BM; WM

Utántöltő – unitip

- 15 unitip (0.16 ml): LD; MD; DD; LE; DE; U

Starter készlet – fecskendő

- 7 fecskendő, minden színből 1: LD; MD; DD; LE; DE; U; ML
- 20 adagolócsőr
- Kiegészítők

Starter készlet – unitip

- 30 unitip (színenként 5 unitip: LD; MD; DD; LE; DE; U)
- 1 fecskendő ML; 20 adagolócsőr
- Kiegészítők

Modifier készlet

- 4 fecskendő: RBM, BM, WM, OM

Essentia színek:



Essentia modifikálók:



essentia

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Hungary
Fazekas u. 29-31.
H - 1027 Budapest
Tel. +36.1.224.04.00
Fax. +36.1.224.04.01
hungary@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

GC

z O LF HU 8 76 06/15

Az esztétikum,
mely visszatér az alapokhoz



Essentia™
a GC-től

Nyisson ajtót az
egyszerűsítésre

Kövesse a megérzéseit

GC

Lehetne még ennél is egyszerűbb?

Az esztétikus helyreállításról gyakran a bonyolult rétegzési technikákra asszociálunk. Sok éves fejlesztés után, **vezető esztétikai fogorvosok tapasztalatai alapján** a GC most a helyreállító fogászatban paradigmaváltó, **innovatív és merész színekonceptiót** mutat be.

Az Essentia a **kompozit rétegzés tiszta lényegét** képviseli. Mostantól mindössze hét fecskendővel minden helyreállításra tökéletes esztétikát nyújtunk Önnek.

Szabaduljon meg a konvencióktól a GC Essentiájával



Prof. Marleen Peumans (Belgium)

A hagyományos színrendszerek különböző színárnyalatokra épülnek, amik A, B, C és D néven ismertek. Ugyanakkor tudjuk, hogy **a zománcnak és a dentinnek más a karakterisztikája**, és mindkettő hozzájárul a fog végső színének érzékeléséhez. Azáltal, ha elszakadunk a hagyományos monokromatikus színektől, és **az enamel és a dentin karakterisztikájának reprodukálására fókuszálunk**, mindössze két egyszerű réteggel juthatunk egy sokkal természetesebb eredményhez.

Ezt kapja Ön az Essentiától

A **három dentinszín** eltérő telítettségű és opacitású, akárcsak az életkor növekedésével a természetes dentin. Ezek **felelősek a rétegzett helyreállítások színének intenzitásáért**.

A dentinokkal párosítva a **két zománcszín biztosítja a fogak translucenciáját**, és életre kelti őket.

Világos Dentin



Közepes Dentin



Sötét Dentin



Világos Zománc



Sötét Zománc



Universal



Masking Liner



Az Essentia minden színe a kezelési jellemzők és az optikai tulajdonságok egyedi keveréke

Dentinek: biztosítják a színadaptációt minden helyzetben

A mikrohibrid kompozíciónak köszönhetően a dentin színek biztosítják a **fény megfelelő visszatükröződését és szóródását** a tökéletes illeszkedés eléréséért.

Lágy viszkozitásának köszönhetően könnyen kezelhető, egy ecsettel vagy egy spatulával is használható.

Zománcok: fényt adnak a helyreállításoknak

Erősebb translucenciájának köszönhetően a zománcszínek természetes hatást kölcsönöznek a helyreállításoknak.

A pár lépésben elvégezhető, könnyű polírozhatóság és a fény **kiváló, hosszú távú megtartása** le fogja nyugáztatni. A végső, külső keménység elérésének érdekében **kissé sűrűbb** a konzisztenciájuk.

Universal: egyetlen szín minden kisméretű és poszterior helyreállításához

Ez az egyetlen szín **tökéletes illeszkedést** mutat minden olyan esetben, ahol nem szükséges a rétegzés, mint például a kisméretű és poszterior kavitások. A poszterior régióba történő könnyebb applikáció érdekében **kissé tömöríthetőbb**.

Masking Liner: az elszíneződések eltüntetése

A Masking Linert azért fejlesztettük ki, hogy a mély kavitásokban gyakran látható elszíneződések és foltok okozta tökéletlenségeket elfedje egy **vékony opak réteggel**. **Fecskendezhető**, hogy még a kavitások legmélyebb részeit is elérje.



LD

MD

DD



LE

DE



U



ML


Az Essentia mindössze két szín használatával lehetővé teszi az élethű anterior helyreállítások létrehozását!



Dr. Javier Tapia Guadix (Spanyolország) és Prof. Marleen Peumans (Belgium) klinikai esete

Ebben a nagy kihívást jelentő esetben **mindössze két szín** (Medium Dentin és Light Enamel) elegendő volt a **szomszédos fogak természetes megjelenésének lemásolásához**, és a fiatal páciens ragyogó mosolyához.

Az Essentia extra erőfeszítések nélkül teszi természetesebbé a poszterior helyreállításokat

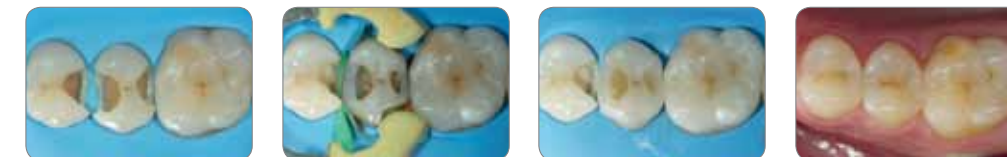


Dr. Javier Tapia Guadix (Spanyolország) klinikai esete

A legtöbb poszterior esetben elég mindössze a **nagyon kromatikus Dark Dentint** és a **Light Enamelt**, használni, melyek együtt **ilyen természetesnek** ható poszterior felépítést eredményeznek.

Az Essentia még a bonyolultabb eseteket is új szintre emeli

A négy modifikálónak köszönhetően a helyreállítási lehetőségei még **jobban kiszélesednek**. A helyreállítások gyors karakterizálására megalkotva: az Opalescent Modifier (bal) segítségével halo-hatást hozhat létre az incizális széleken, vagy repedéseket a poszterior területeken a Red Brown Modifier (jobb) segítségével.

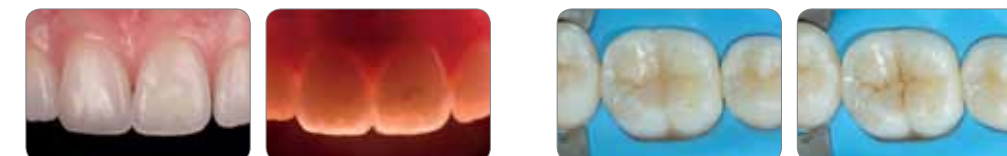

Dr. Javier Tapia Guadix (Spanyolország) klinikai esete